

OPTIMA PLUS

BC-EC8002-HD



MD

BRUGERMANUAL TIL ELEKTRISK KØRESTOL

INDEKS

1. Introduktion
2. Forholdsregler for sikker brug
3. Tekniske specifikationer og struktur
4. Samling, justering og foldning
5. Brug, drift og fejl
6. Vedligeholdelse
7. Transport og opbevaring
8. Kvalitetsgaranti

1. Sikkerhedskopiering

2. Armlæn

3. Joystick

4. Sæde

5. Chassis

6. Batteri

7. Fodstøtte

8. Forhjul



1 INDLEDNING

1.1 PRODUKTBESKRIVELSE

Sitgo OPTIMA PLUS elektriske kørestol kombinerer avanceret teknologi med et moderne og funktionelt design. Dens stel muliggør hurtig montering og afmontering og er ideelt til opbevaring eller transport i bagagerummet. Dette produkt er designet til at forbedre komfort og mobilitet i dagligdagen. Dets forstærkede kulfiberchassis gør den ekstra stærk og ultralet.

1.2 Anbefalet brug

- Designet til mennesker med handicap.
- Maksimal lastevægt: 200 kg.
- Til indendørs og udendørs brug på plane overflader.
- Ikke egnet til græs, grusstier, stejle skråninger, motorveje, regn eller sne.

1.3 Yderligere oplysninger

- ⚠ Læs og følg alle advarsler og instruktioner i denne manual omhyggeligt, inden du bruger kørestolen for første gang. Sikker brug af produktet afhænger af, at advarslene og instruktionerne i denne manual følges og overholdes. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af advarslene og instruktionerne i denne manual. Denne manual indeholder instruktioner til brug og vedligeholdelse. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din distributør eller ortopædkirurg.

FORHOLDSREGLER TIL SIKKER BRUG

2

- ⚠ **Eksklusiv brug:** Stolen er beregnet til én person. Den bør ikke bruges til at bære genstande eller til sportsaktiviteter. **Armlæn og fodstøtter:**
- ⚠ Brug ikke armlænene som forflytningsstænger, og koncentrer ikke vægten på fodstøtterne. For at undgå skader og personskader.
- ⚠ **Ændringer:** Foretag ikke ændringer eller tilføj tilbehør uden tilladelse, da dette kan ændre specifikationerne og forårsage skade.
- ⚠ **Regn:** Brug ikke stolen i regn eller på våde steder.
- ⚠ **Skråninger og forhindringer:**
- Brug ikke stolen på stejle skråninger (den anbefalede maksimale hældning er 6° og må aldrig overstige 10°), farlige veje, sne, is, vådt græs eller glatte overflader.
 - Forsøg ikke at krydse forhindringer højere end 25 mm eller at gå op ad trapper eller rulletrapper.
- ⚠ **Manuel tilstand:** Brug ikke stolen i manuel tilstand uden hjælp fra en ledsager, især ikke på skråninger.
- ⚠ **Elektrisk sikkerhed:**
- Tilslut ikke andre apparater til stolens elektriske system.
 - Hold opladerens terminaler rene og tørre.
 - Oplad ikke batteriet, hvis det er frossent eller vådt.



3.1 Dimensioner og hovedkarakteristika:

Samlede dimensioner	113 x 71,5 x 105 cm	Batteri	24V/30AH
Dimensioner foldet	41,5 x 70,5 x 86 cm	Batteriets vægt	3 kg
Sædehøjde	56 cm	Oplader	5Ah udgang
Sædebredde	49,5 cm	Lastkapacitet maksimum	200 kg
Ryglænets højde	50 cm	Maksimal hastighed	6 km/t
Bremselængde	1500 mm	Maksimal autonomi	25 km (på flad vej og ved gennemsnitshastighed)
Drejeradius	900 mm	Motorer	24V/250W x 2
Maksimal hældning anbefalet	6. aldrig overstige 10°	Baghjul	Magnesiumlegering 12" solid
Samlet vægt	18,6 kg (uden batteri)	Forhjul	Legering af 8" fast magnesium

3.2 Hovedkomponenter:

• Sikkerhedskopiering.

- Sædehynde.
- Batteri.
- Joystick.
- Justerbare armlæn.
- For- og baghjul.

- Motor.
- Bremsegreb.
- Antirullehjul.
- Fodstøtte.
- Ramme.

4.1 Samling:

- 1.Tag kørestolen ud af kassen.
- 2.Træk fodstøtten fremad.
- 3.Hold ryglænet med den ene hånd og sædet med den anden. Træk frem og tilbage, indtil du hører et "klik", der angiver, at låsen er gået i hak i låsestiften.
- 4.Tilslut joysticket, og placer det på det ønskede armlæn.
- 5.Sørg for, at batteriet er korrekt placeret "under sædet" og opladet.

- 6.Tænd stolen, og kontroller, at den fungerer korrekt.
- 7.Placer hynden på sædet.


Note:Før du sætter dig ned, skal du sørge for, at låsen er ordentligt fastgjort.

4.2 Indstillinger:

- **Joystick:**Juster joystickets position i henhold til din armlængde. Løsn armlænskappen, juster joysticket, og fastgør det derefter ved at stramme knappen.
- **Bremsegreb:**
Position A: Elektrisk tilstand "bagud" (elektrisk bevægelse). Position B: Manuel tilstand "fremad" (skubbebevægelse).
- **Armlæn:**Tryk på låseknappen for at vippe armlænet op eller ned efter behov.
- **Fodstøtte:**Juster fodstøttens dybde.

4.3 Foldning:

- 1.Træk i låsen på bagsiden af stolen.
- 2.Vip sædet op.
- 3.Fold fodstøtten sammen og fastgør den med tape for at forhindre den i at bevæge sig.

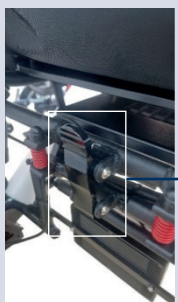

Lås

5 | BRUG, DRIFT, FEJL

5.1 Brug af joystick:

Komponenter:


- Tænd/sluk-knap.
- Batteriindikator.
- Hastighedsindikator.
- Knapper til at øge/sænke hastigheden.
- Joystick-håndtag til retning og hastighed.
- Hornknap. **Joystick-**

lås:

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 5 sekunder.

Joystick-oplåsning:

Tryk og hold hornknappen nede i 5 sekunder.

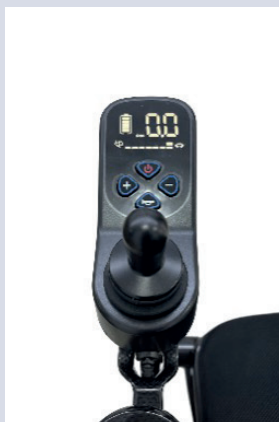

5.2 Batteriopladning:

Indledende belastning:

Oplad helt før første brug (6-8 timer). **Normal**

opkrævning:

- 1.Sluk stolen.
- 2.Tilslut opladeren til stolens opladningsport (joystick) og til stikkontakten.

3.Det røde lys angiver, at den oplader; det grønne lys angiver, at den er fuldt opladet.

Note:Brug ikke stolen, mens den oplades.

5.3 Almindelige fejl:

C4:Elektrisk bremsegreb i manuel position. Løsning: Flyt det elektriske bremsegreb tilbage. **LC:**Forældrelås med joystick.

Løsning: Tryk og hold hornknappen nede i 5 sekunder. **Note:**Ved andre problemer bedes du kontakte teknisk support.

OPRETHOLDELSE 6 |

Før du bruger kørestolen, bør du kontrollere, at den fungerer korrekt. Alle hjullejer og motoren er smurt og forseglet; det er ikke nødvendigt at smøre dem.

- **Udfør daglig overvågning:**Batteri, elektrisk bremse, generel betjening.
- **Udfør månedlig overvågning:**Forbindelser, hjul.
- **Foretag et halvårligt eftersyn:**Funktionaliteten af kørestolens forskellige komponenter.
- **Udfør et årligt eftersyn:**Komplet eftersyn. Motorer, generelle fastgørelseselementer.
Anbefales på et autoriseret værksted.
- **Oplad batteriet:**Hver gang du bruger kørestolen, hvis muligt dagligt.

7 TRANSPORT OG OPBEVARING

7.1 Transport

- ⚠ Det anbefales at transportere kørestolen i dens originale emballage. Tag
- ⚠ batteriet ud af stolen, og beskyt det med bobleplast.
- ⚠ Læg ikke vægt oven på stolen, når den er foldet sammen.

7.2 Opbevaring

- ⚠ Stolen skal opbevares rent, tørt og køligt. Aldrig uden for dette område: -10°C til 40°C.
- ⚠ Fjern batteriet, og lad det stå fuldt opladet uden for stolen. Oplad batteriet én gang om måneden, selvom det ikke er i brug.

8 GARANTI

- **Garantien på stolens komponenter er 3 år**
 - Chassiset har 5 års garanti.
 - Batteri og oplader har en minimumsgaranti på 1 år; efter denne periode vil tilstand, slitage og brugsmåde blive vurderet. **Tab af garanti**
-
- Produktet må ikke håndteres af ukvalificeret og uautoriseret personale.
 - Alle komponenter skal være originale.
 - Brug af stolen til et andet formål end det tilsigtede formål.
 - Tvangspåvirkning eller overskridelse af brugsgrænser (vægt, spænding, temperatur osv.)
 - Stød, fald, fugtighed eller væsker.
 - Naturlig slitage: Forringelse fra normal brug af hjul, batterier, polstring osv.
 - Brug den ikke på forbudt terræn: Sand, vandpytter, mudder osv.
 - Skader fra elektrisk overbelastning.
 - Oplad ikke batteriet i længere tid.

Dato for sidste revision: **28/02/2026**

Liste over symboler

	serienummersymbol
	Symbol for konsultation af brugsanvisning
	PRODUCENTENS SYMBOL. Dette symbol ledsages af producentens navn og adresse.
	Symbolet "FREMSTILLINGSDATO"
	Unik enhedsidentifikation
	CE-symbol
	Symbol for medicinsk udstyr
	Repræsentantens symbol i Den Europæiske Union, navn og adresse
	Advarselssymbol
	Symbol for maksimal tilladt vægt

FABRIKANT:

NINGBO BAICHEN MEDICAL DEVICES Co., LTD.
Adresse: Værelse 903, Diqu-bygningen, Taikang
Middle Road 666, Ningbo, Zhejiang, C



Repræsentant i Den Europæiske

Union: SUNGO Europe BV
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
Holland - SRN: NL-AR-000000247



Importøroplysninger:

Guimi Evomedical, SL
Av Sant Esteve 157, 08211 Castellar del Valles, Barcelona (Spanien)

