

BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kørestol

Produktkode: FLASH-TIM



1. Sikkerhedsoplysninger

- Læs manualen før første brug.
- Brug ikke kørestolen, før den er helt samlet.
- Brug af kørestolen af personer, der ikke er i stand til at betjene den selvstændigt, anbefales ikke.
- Maksimal bæreevne må ikke overstige 120 kg.
- Kørestolen må kun bruges af én person ad gangen.
- Det anbefales at holde fødderne på fodstøtten og underarmene på armlænene, når du kører.
- Kontroller altid batteriniveauet på kontrolpanelet før brug.
- Denne elektriske kørestol bør kun bruges på en flad overflade eller i lave højder. Den bør ikke køres på en overflade, der hælder i en vinkel på mere end 8 grader.
- Kør ikke kørestolen med maksimal hastighed, når du kører op eller ned ad bakke.
- Brug ikke kørestolen på bløde og glatte overflader som mudder, sand osv.
- Kør ikke kørestolen sidelæns på højt hævede områder.
- Læg ikke ekstra belastning, såsom en trailer osv. på kørestolen.
- Reparer eller modificer ikke kørestolens konstruktion på egen hånd. Brug kun originale reservedele leveret af producenten.
- Stå ikke op eller sæt dig ned på kørestolen, når kontrolmodulet er tændt.
- Brug ikke kørestolen uden anti-tip hjul.
- Når friløbstilstanden (manuel) er aktiveret, må du ikke stige af eller på kørestolen uden hjælp.
- Læn dig ikke fremad for at få fat i genstande, der ligger foran, på siden eller bagved kørestolen. Stå ikke på fodstøtten. Det kan resultere i, at kørestolen vælter.
- Undgå hurtige retningsændringer under kørsel i højder.
- Sæt altid farten ned, mens du kører ned ad bakke eller svinger.
- Kontroller før brug, om hjulene er korrekt monteret.
- Foretag ikke pludselige bevægelser, mens du bruger joysticket.

- Ved opbevaring skal du beskytte kørestolen mod regn og ugunstige vejrforhold.
- Før du tænder for kørestolen, skal du sikre dig, at håndtagene er indstillet til elektrisk tilstand.
- Undgå områder med vandrette mellemrum.
- Hvis kørestolen ikke skal bruges i længere tid – fjern batteriet.
- Brug ikke kørestolen på vejen. Det kan resultere i en bilulykke.
- Opbevar ikke kørestolen på steder med høje temperaturer og luftfugtighed.

2. Produktbeskrivelse og anvendelse

Elektrisk kørestol er designet til mennesker, der har problemer med mobilitet, og hjælper handicappede patienter med deres daglige opgaver. Den kan erstatte en almindelig kørestol.

Elektrisk kørestol er velegnet til patienter med:

- handicap, som har problemer med uassisteret bevægelse,
- dysfunktioner og nedsat bevægelighed,
- hjerte og karsygdomme,
- svækkelse af kroppen på grund af høj alder.

A. KØRESTOLENS ELEMENTER



1. Håndtag
2. Ryglæn
3. Sæde
4. Armlæn
5. Kontrolmodul
6. Støtte hjul til transport
7. Bag hjul 12"
8. Forhjul 8 "
9. Fodstøtte



- 10. Taske
- 11. Sikkerhedsspænde
- 12. Montering skrue
- 13. Foldning knap
- 14. Lithium batteri
- 15. Motorhåndtag (tilstand)



B. PRODUKT KARAKTERISTIKA

- Aluminium, folderamme
- Solide 12" og forreste 8" hjul
- Kontrolmodul: tænd/sluk-knap, styrejoystick, hornknap, hastighedsjustering, batteriniveauindikator, mute-knap
- Sikker og pålidelig elektromagnetisk bremse
- Fuldt lukket, vedligeholdelsesfrit batteri
- Sikkerhedssele og anti-tip hjul
- Lomme til småting placeret bagpå
- To driftsformer: elektrisk og manuel
- Rem - til fastgørelse af en sammenfoldet kørestol

C. TEKNISKE PARAMETRE

1. Produkttype: til indendørs og udendørs brug
2. Maksimal hastighed: ≤ 6 [km/t]
3. Maksimal kapacitet: 120 [kg]
4. Bremselængde på vandret overflade: $\leq 0,8$ [m]
5. Maks. rækkevidde: 20-25 [km]
6. Batteri: lithium, 24 [V] x 12 [Ah]
7. Maks. Højdevinkel: $\leq 8^\circ$

8. Maks. venderadius: 1,20 [m]






9. Kørestolsvægt: 19,10 kg

10. Batterivægt: 3,30 kg

Note! Nogle parametre kan variere afhængigt af brugerens vægt, vejforhold og batteriforbrug.

- Sikkerhedsklassificering: type B
- Indtrængningsbeskyttelsesniveau for motor: IP44
- Motoreffektniveau: 2x150[W]
- Kørestolen kan ikke bruges i områder med brændbar gas blandet med luft, ilt eller lattergas.

3. Ikon beskrivelse

Symbol	Mening
	Sikkerhed Klassifikation type B
	Vigtig! Læs brugermanualen
IP44	Beskyttelse mod adgang til farlige dele med et værktøj, beskyttelse mod fremmede faste stoffer med en diameter på 1 mm og større, beskyttelse mod vandsprøjt fra enhver retning
	Skrøbelig
	Denne side op
	Beskyt mod fugt og fugt

4. Montering og justering

- **Udfoldning:** Tag kørestolen ud af kassen. Fold den ud, indtil du hører en "klik"-lyd. Tilslut strømkablet til batteriet.
- **Sammenfoldning:** Kørestolen foldes sammen ved at låse klemmen, der er placeret på bagsiden, op, tage fat i håndtaget og skubbe det ned. For ekstra sikkerhed, for at forhindre kørestolen i at folde sig ud, brug den medfølgende rem.

Note! Tag strømkablet ud af batteriet, før det foldes ud.

- **Kontrolmodulets position:** Justering skal foretages mens du sidder. Løsn monteringskruen og juster panelets position. Spænd skruen.

- **Armlæn vipning:** Tryk på knapperne placeret på ydersiden af kørestolen for at løfte armlænen. For at sænke armlænet skal du trække dem ned, indtil du hører en "klik"-lyd.
- **Anti-tip hjul samling:** Sæt hjulene ind i monteringsåbningerne placeret bag på kørestolen. Fastgør dem med dedikerede skruer og spænd dem med en unbrakonøgle og en tang.
- **Fjernelse af batteriet:** For at fjerne batteriet skal du låse spændet nedenunder og langsomt trække batteriet ud.




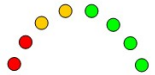

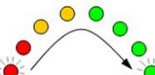
5. Operation

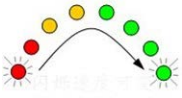

A. STYREMODULENS FUNKTIONER



- **Joystick (A)** – bruges til at styre hastighed og retning. Jo længere joysticket skubbes væk fra midten, jo hurtigere vil kørestolen bevæge sig. Den vil automatisk miste hastigheden, når joysticket slippes.
- **Tænd/sluk-knap (B)**
- **Hastighedsindikator har 5 niveauer (C):** 1 – langsomst, 5 – hurtigst.
- **Hornknap (D)** – tryk for at bruge hornet.
- **Hastighedsjusteringsknapper (E)** – brug +/- for at øge eller mindske hastigheden
- **Batteriniveauindikator (F)**
- **Mute-knap (G)**
- **USB-port og modul med lommelygte (H)**

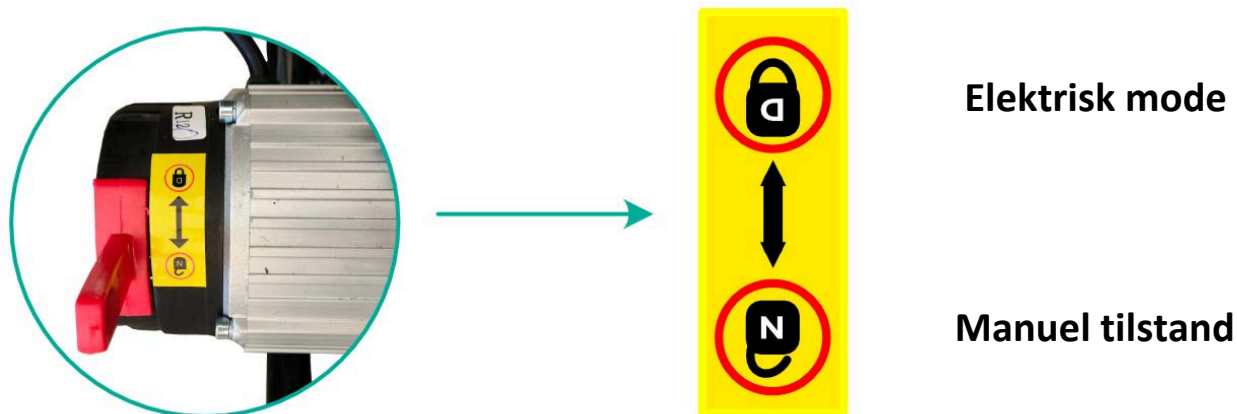


LED display	Status	Beskrivelse
	Alle LED-lys er slukket	Kørestolen er slukket eller i dvaletilstand.
	Alle LED-lys er tændt	Kørestolen er tændt. Lysets farve viser batteriniveauet. Grøn – fuldt opladet, rød – batteri opbrugt.
	Blinkende rødt LED- lys	Batteriet er ved at være lavt. Oplad så hurtigt som muligt.
	LED'er lyser i en sekvens fra venstre mod højre	Kørestolsbatteri oplades. Når kørestolen er tæt på at være fuldt opladet, sænkes hyppigheden af blink. Alle grønne lamper lyser angiver, at batteriet er fuldt opladet.

	<p>LED'er blinker i en rækkefølge fra venstre mod højre</p>	<p>Kørestolen er i køretilstand. Farven afhænger af batteriniveauet.</p>
	<p>Alle LED-lys blinker</p>	<p>Kørestolen er i manuel (frihjuls) tilstand. Sluk for kontrolmodulet, og skift tilstand ved hjælp af de dedikerede håndtag. Tænd for modulet igen for at bruge kørestolen i elektrisk tilstand.</p>

B. MANUEL OG ELEKTRISK TILSTANDSOMSKIFTE

For at bruge kørestolen i manuel tilstand skal du flytte venstre og højre motorhåndtag, der er placeret bagerst, ned. For at bruge den i elektrisk tilstand skal du flytte håndtagene op.



C. OPLADER

- Sættet inkluderer en oplader dedikeret til batteriet.
- Batteriets opladningstid er omkring 6 timer.
- Sæt opladeren i ladeporten i kontrolmodulet eller på batteriet:



- Tilslut opladeren til strømforsyningen.

- Tjek forbindelsen.
- For at undgå risikoen for brand må du ikke ændre eller afbryde ladekredsløbet, mens batteriet oplades.

D. BRUGSANVISNING

- Vælg den ønskede køretilstand.

Note! Skift ikke køretilstand, mens du kører i højden.

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere, at bremsene fungerer korrekt. Bremsene fungerer korrekt (elektrisk tilstand), hvis du ikke kan skubbe kørestolen. Ellers kontakt sælgeren.
- Vip fodstøtten og sæt dig komfortabelt på sædet. Sænk fodstøtten tilbage til vandret position.

Note! Brug ikke fodstøtten som støtte, når du sætter dig ned eller rejser dig fra kørestolen. Dette kan få kørestolen til at vippe og falde.

- Sæt dig på kørestolen og tænd for kontrolpanelet. Lysene vil lyse. Joysticket skal være i neutral position.
- Vær forsigtig, når du bruger den første gang. Kontroller hastigheden og retningen omhyggeligt. Den elektromagnetiske bremse udløses først efter at have trykket på joysticket (elektrisk tilstand). For at øge hastigheden skal du skubbe joysticket længere væk fra dets neutrale position. For at sætte farten ned – gør det modsatte.
- Slip joysticket for at standse kørestolen. Et tryk på tænd/sluk-knappen vil også stoppe kørestolen.
- Brug dedikerede knapper på kontrolpanelet til at justere kørestolens hastighed i henhold til brugerens fysiske tilstand og vejforhold.
- Kørestol bør kun bruges på flade overflader. Kørsel på mudrede eller ujævne overflader kan forårsage skade på kontrolsystemet.

6. Tekniske data

Produktkode	FLASH-TIM
Samlet set højde	93 cm
Samlet set bredde	62 cm
Samlet set længde	90 cm
Sædehøjde fra g runde	46 cm med pude: 54 cm

Ryglænets højde	41 cm
Sædehynde dimensioner	45 x 45 x 8 cm
Batterivægt	3,30 kg
Maksimal kapacitet	120 kg
Kørestol vægt	19,10 kg
Hjul	foran: solid, 8" bagside: solid, 12"

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Det anbefales regelmæssigt at efterse konstruktionen og dens elementer (hjul, rammer, kabler, styremodul, bremses osv.).
- Alle brugte eller beskadigede kørestolsdele skal udskiftes (i sådanne tilfælde skal du kontakte sælgeren).

8. Batterivedligeholdelse og rengøring:

- 1) Kontroller jævnligt det viste batteriniveau. Hvis niveauet er meget lavt, skal det straks oplades for at undgå et spændingsfald (som kan påvirke batteriets levetid).
- 2) Hvis kørestolen ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet oplades mindst en gang om måneden.
- 3) Batteriet har en vis levetid. Udskift dit batteri, hvis det bliver slidt.
- 4) Batteriet skal holdes rent og væk fra børn. Undgå at forårsage stød eller beskadigelse af batteriet.
- 5) Oplad den regelmæssigt for at forlænge dens levetid.
- 6) Brugte batterier skal bruges i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser.

9. Opbevarings og transportforhold

A. TRANSPORT

- Vær forsigtig under transport. Smid ikke, vend eller læg pres på produktet og dets emballage.
- For kørestolsfoldning, tjek „Samning og justering”.

B. OPBEVARING

Kørestolen skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted. Undgå: høj temperatur og dens hurtige ændringer, syrer, baser og ætsende kemikalier.

C. OPBEVARINGSBETINGELSER

Temperatur : -25[°C] ~+55[°C]

Luftfugtighed: 30-75 %

10. Fejlfinding

I tilfælde af funktionsfejl vil styremodulet indikere det med et bip og en blinkende diode. Antallet af bip og LED-blink vil hjælpe med at identificere problemet.

Antal blink	Type problem	Årsag / mulig løsning
1	Brugerfejl	Brugeren har overskredet grænsen indstillet af controlleren. Kørestolen tænder ikke.
		Slip joysticket tilbage til midterposition, og prøv igen.
2	Interface fejl	Kontrolpanelets grænsefladefejl opstår.
		Kontakt sælgeren for at udskifte panelet.
3	Batteri/opladerfejl	Oplader eller batteri kan være blevet beskadiget.
		Kontroller, om strømkablerne er strammet.
4	Venstre motor fiasko	Kontroller, om netledninger forbundet til venstre motor er strammet.
5	Højre motorfejl	Kontroller, om netledninger, der er tilsluttet den højre motor, er strammet.
6	Fejl i venstre elektrisk bremse	Kontroller, om netledninger forbundet til venstre bremse er strammet. Se efter skader eller forbindelsesfejl.
7	Fejl i højre elektrisk bremse	Kontroller, om netledninger forbundet til højre bremse er strammet. Se efter skader eller forbindelsesfejl.
8/9	Kontrolmodul fejl	Tjek forbindelsen. Kontakt venligst sælgeren.

11. Garantioplysninger

- Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores

hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Vær venligst opmærksom på, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien. Som en brugervenlig virksomhed leverer vi kun testede produkter - hvad angår materiale, kvalitet og funktionalitet. Hvis du har spørgsmål vedrørende serviceprocedurer, bedes du kontakte os.

- Garantien dækker ikke:
 - sliddele: polstring, dæk, armlæn, batteri
 - skader som følge af: selvreparationer, ændringer i produktkonstruktion, tab, transport, uhensigtsmæssig brug, manglende overholdelse af instruktionerne, naturkatastrofer (brand, jordskælv, oversvømmelse)



Wen'an County Wantong Medical Instrument Co., Ltd.

Nan Liu Zhai Village, Wen'an County, Langfang City, Hebei-provinsen, Kina



SUNGO Cert GmbH

Harffstr . 47, 40591 Düsseldorf, Tyskland



Timago International Group

Spółka z oo i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polen

T.: +48 33 499 50 00

E.: info@timago.com



12/2024(I)