

BRUGERVEJLEDNING

Aluminium 4-hjulet rollator

Produktkode: LORENZA




1. Karakteristika

Firehjulet rollator er lavet af høj kvalitets aluminium . Den har solide forreste 10" og bagerste hjul på 7,5" diameter, højdejusterbare håndtag afsluttet med anatomiske greb, bremses med parkeringsfunktion, sæde med ryglæn og taske. Strukturen er baseret på en crossover-ramme og et ovalt tværsnit af rør, takket være hvilket modstanden mod aksialt tryk øges betydeligt. Det skjulte bremsekabel giver et æstetisk udseende.

Sættet indeholder : stel med sæde, for- og baghjul, ryglæn, indkøbspose.

Rollatorens elementer:

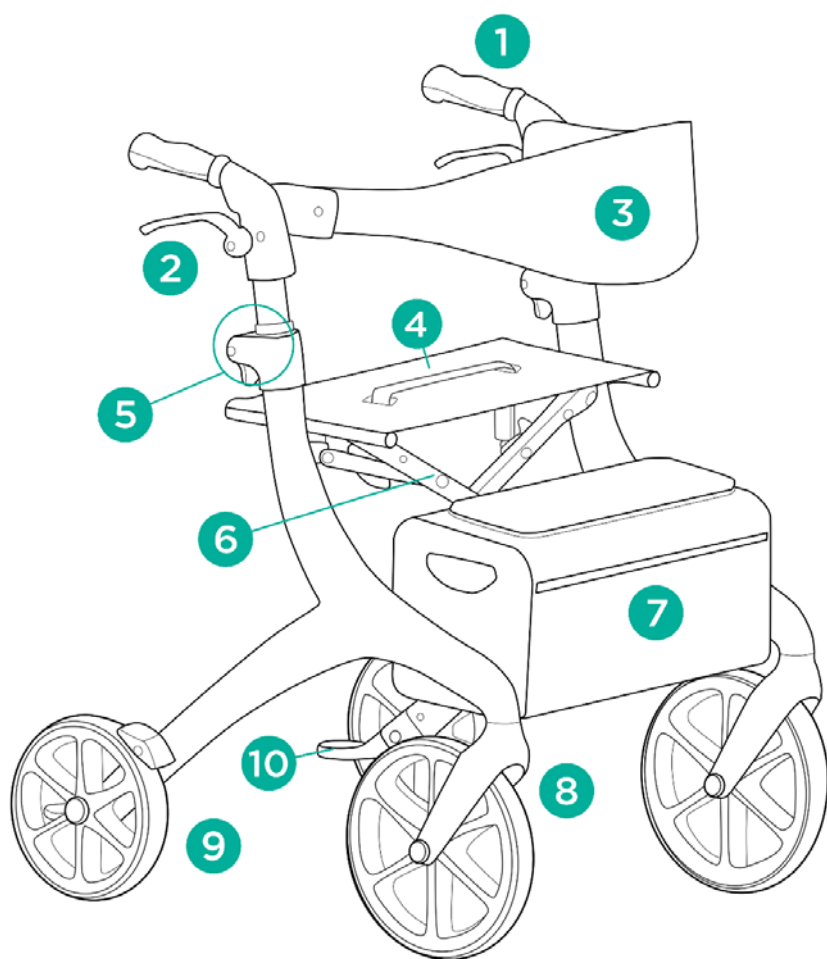

1. Håndgreb
2. Bremse med parkeringshåndtag
3. Ryglæn
4. Sæde
5. Lås til højdejustering
6. Tværstang
7. Taske
8. Forhjul 10"
9. Baghjul 7,5"
10. Støttepedal

2. Ansøgning

Rollatoren er designet til patienter med nedsat mobilitet, som har brug for stabil støtte og hjælp under gang. Det anbefales også til ældre som en hjælp til at holde balancen for at forbedre gåkomforten og sikre sikkerheden mod at falde. Brugen af rollatoren har en positiv effekt på tilbagevenden til aktivitet af personer med bevægelse og vipning for at rejse stillingsproblemer. Det garanterer bedre stabilisering, støtte og sikkerhed, mens du går.

3. Samling

Udfolder sig

- For at folde rollatoren ud, tag fat i begge håndtag og træk dem udad. Tryk forsigtigt på sædet på begge sider for at folde rollatoren helt ud (karakteristisk "klik"-lyd).

Foldning

- For at folde rollatoren skal du trække sædet op.
- Sørg for, at rollatoren er korrekt foldet.

Højdejustering af håndtag

Sådan justeres håndtagets højde:

- Tryk bremsen ned for at aktivere parkeringsbremsen og immobilisere rollatoren.
- Løft justeringsklemmen op.
- Juster højden på håndtaget.
- Spænd klemmen for at låse den justerede højde på håndtagene. Træk håndtaget op og ned flere gange for at kontrollere, at det er låst korrekt.
- Juster højden på det andet håndtag på lignende måde.

NOTE! Begge håndtag skal sættes i samme højde.

Bremsefunktion

- For at stoppe rollatoren skal du trække bremsehåndtaget op og derefter holde.
- Når du ikke er i bevægelse eller bruger sædet, låses parkeringsbremsen med parkeringsklemmen ved at trække bremsehåndtaget ned.
- Træk håndtaget opad for at udløse parkeringsbremsen .

Af- og påsætning af ryglæn og taske

Taske og ryglæn kan afmonteres.

- For at fjerne ryglænet skal du trykke på knappen placeret øverst, inderste del af stellet og trække ryglænet op.
- For at fjerne posen skal du trække den op fra monteringsåbningerne i bunden, inderste del af rammen.
- Gentag trin baglæns for at fastgøre taske og ryglæn.

Støttepedal

- Støttepedalen bruges til at hjælpe med at overvinde forhindringer, såsom kantsten. Tryk ned på pedalen med din fod for at løfte rollatoren op.

4. Tekniske data

Mål efter foldning	70 x 15 x 86,5 cm
Samlet bredde efter udfoldning	58 cm
Samlet længde	87 cm
Sædebredde	45 cm
Sædehøjde fra jorden	55 cm
Højdejustering af håndgreb	86,5-96,5 cm
Rollator vægt	7,50 kg
Maksimal kapacitet	136 kg
Ramme farve	mørkeblå

5. Noter

Timago International Group påtager sig ikke ansvar for forkert brug af rollatoren, manglende overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og misbrug.

6. Opretholdelse

- Rengør rammen med en fugtig klud og tør grundigt.
- Brug ikke stærke polermidler på grund af risikoen for beskadigelse af beskyttende belægninger.
- Rens jævnligt snavset fra rollatorens bevægelige dele (hængsler, klemskruer, låse).

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



02/2025(I)