

BRUGERVEJLEDNING

Badestol med ryglæn – uden brug af værktøj

Produktkode: TGR-R KP 350L



1. Egenskaber

Badestolen er fremstillet af en aluminiumsramme med et holdbart PVC-ryglæn og et bredt sæde. Den er udstyret med højdejusterbare ben og håndtag, som gør produktet nemmere at bruge. Specielt designede gummidupper forhindrer stolen i at glide på våde overflader. Stolen har et værktøjsfrit (TF) system, der forenkler samlingen.

Sættet indeholder: Ryglæn Stolens baserør (2 stk.) Højdejusterbare ben (4 stk.) Ryglænsrør (2 stk.) Lange monteringskruer med skiver (5 stk.) Korte monteringskruer med skiver (4 stk.)

Elementer af badestolen:

- A. Ryglæn
- B. Ryglænsrør
- C. Sæde
- D. Baserør
- E. Højdejustering
- F. Skridsikker dupsko



2. Application

Badestolen er et hjælpemiddel, der assisterer brugeren med at udføre hygiejniske aktiviteter. Stolen anbefales til personer med nedsat mobilitet, som forhindrer eller vanskeliggør selvstændig udførelse af daglige aktiviteter. Stolen kan bruges i brusebadet, i badekarret, på badeværelset og i andre fugtige rum – både i hjemmet og på hospitaler.

3. Samling


Trin 1. Placer sædet med undersiden opad på en plan overflade.

Trin 2. Monter baserørene krydset i midten på sædet ved hjælp af den korte monteringskrue med skive (billede 1).

Trin 3. Sæt benene på baserørene og lås i den ønskede højde.

Trin 4. Fastgør ryglænsrørene til baserørene ved hjælp af de lange monteringsskruer med skiver (billede 1).

Trin 5. Stil den samlede badestol oprejst på benene og fastgør ryglænet med de korte monteringsskruer med skiver.

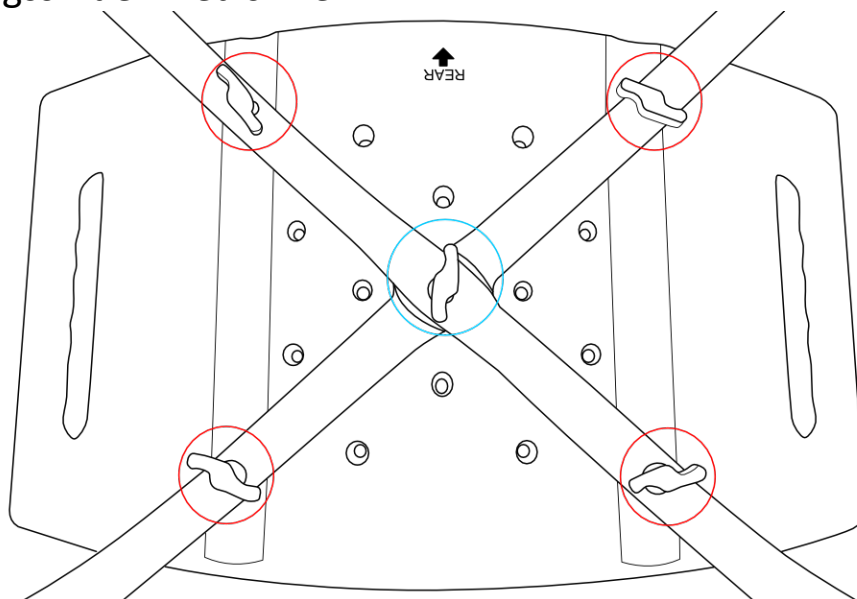

Picture 1

HØJDEJUSTERING

- For at justere stolens højde, tryk på låseknappen, vælg den ønskede højde på benet, og lås derefter igen. Gentag processen på de øvrige ben. Benene kan justeres i intervaller på 2,5 cm.

Bemærk! Alle ben skal indstilles til samme højde.

4. Tekniske data

Bredde	49 cm
Dybde	44 cm
Sædehøjde fra gulv	36-46 cm
Samlet højde	64-74 cm
Sædemål	49 x 29 cm
Vægt	3,15 kg
Maksimal belastning	136 kg

5. Bemærk

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

- Rengør badestolen regelmæssigt med vand, en svamp og milde rengøringsmidler egnet til plastmaterialer, f.eks. sæbe. Tør grundigt af.
- **Brug ikke følgende til rengøring:** stærke rengøringsmidler, slibende midler, blegemiddel, benzin eller opløsningsmidler (dette kan beskadige stellet, give synlige defekter og medføre tab af garantirettigheder).
- Kontroller mindst hver tredje måned rørenes tilstand, låseskruer og om skruer er spændt korrekt.
- Det anbefales regelmæssigt at kontrollere gummidupperne. Udskift dem med nye, hvis de er slidte.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantibetingelser

Alle produkter distribueret af vores virksomhed er omfattet af garanti. Garantibetingelserne fremgår af garantibeviset, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at gemme købsbeviset (kvittering eller faktura), da det er nødvendigt for at gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025 (I)