

# BRUGSANVISNING

## Toiletstol/

## Toiletstol m. hjul

Produktkode: TGR-R KT 023B/TGR-R KT 023C



### 1. Udførelse

Toiletstolen er udført i et pulvermalet stålstel. Model **TGR-R KT 023B** har højdejusterbare ben m. gummifødder, mens model **TGR-R KT 023C** har ben m. hjul, hvoraf baghjulene er udstyret m. en bremse. Stolen er sammenklappelig, udstyret m. et toiletbræt m. klap og en let aftagelig bækkenspand m. låg. Stolen sammenklappes og justeres let og dermed tilpasses den enkeltes behov, og armlænene på begge sider sikrer bedre stabilitet og brugssikkerhed.


#### Toiletstolens elementer:

- a. armlæn
- b. toiletbræt
- c. bækkenspand
- d. højdejustering
- e. fødder m. anti-skrid
- f. hjul (baghjul m. bremse)

### 2. Anvendelse

En toiletstol er et hjælpemiddel, der gør det lettere for brugeren at udføre toiletrutiner. Den anbefales

til personer m. mobilitetsbesvær, nedsat funktion og personer, der lider af andre bevægelsesbegrænsende tilstande, samt til dem, der ikke længere selvstændigt kan sætte og rejse sig fra toilettet. Stolen er udstyret m. en bækkenspand m. låg, som er anbragt under sædet, og dermed har en toiletfunktion. Den hjælper plejepersonalet m. at udføre toilet- og plejerutiner. Takket være kørehjulene kan den nemt køres ind over toilettet efter at bækkenstanden er fjernet.

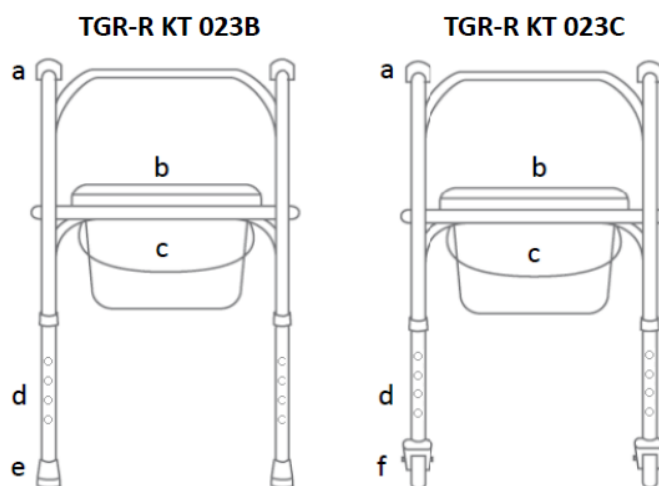

Takket være kørehjulene kan stolen nemt køres ind over toilettet efter at bækkenstanden er fjernet.

### 3. Montering

#### Opklapning og sammenklapning af toiletstolen

- Anbring toiletstolen på gulvet. Grib fat i plasthåndtagene og klap stolen op. Montér den forreste del af stellet.
- Et toiletbræt og en klap monteres bagerst på toiletstollens stel, og en bækkenspand – midt på stellet.
- For at klappe stolen sammen skal du tage bækkenspanden af, skubbe den forreste del af rammen nedad, hvorefter den ene side heraf skal vippes fremad og den anden bagud.

#### Højdejustering

For at justere stolen i højden, skal du trykke på metalstiften på stolens ben, vælge den ønskede højde på det indvendige rør, og derefter låse rørene i position i forhold til hinanden. Benene justeres trinvist for hver 2,5 cm. **Bemærk!** Stifterne i alle benene skal være sat i samme højde. Benene bør altid hvile stabilt på underlaget.

#### Anvendelse

**Bemærk!** Husk altid at aktivere bremserne, når du skal sætte dig el. rejse dig op fra toiletstolen, ændre position el. parkere. (**vedr. model TGR-R KT 023C**). Løft toiletklappen, og dernæst fjern låget fra bækkenspanden. Sæt låget på plads efter endt brug og luk toiletklappen.

#### 4. Teknisk specifikation

Totalbredde	56 cm
Indvendig bredde	46 cm
Totaldybde	47 cm
Sædehøjde fra underlaget - TGR-R KT 023B	46-56 cm
Sædehøjde fra underlaget -TGR-R KT 023C	59-69 cm
Totalhøjde fra underlaget - TGR-R KT 023B	73-83 cm
Totalhøjde fra underlaget - TGR-R KT 023C	89-99 cm
Sædedimensioner	38 cm x 40 cm
Stolens vægt for model TGR-R KT 023B	6,5 kg
Stolens vægt for model TGR-R KT 023C	8,0 kg
Maks. belastning	120 kg
Stelfarve	grå

#### 5. Bemærkninger og anvisninger

**Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af toiletstolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af rollatoren i strid med formålet.**

#### 6. Vedligeholdelse

Den tekniske tilstand af toiletstolen skal kontrolleres regelmæssigt på egen hånd: Toiletstolen skal rengøres regelmæssigt kun m. vand og blide rengøringsmidler, der besidder en PZH-attest. Aftør stolen grundigt. **Undlad at bruge:** aggressive poleringsmidler, stærke rengøringsmidler, slibemidler, blegemidler, benzin el. nogen som helst opløsningsmidler til rengøring (der er risiko for beskadigelse af stellet, synlige mangler, og som konsekvens heraf – bortfald af garantien). Bækkenspanen skal tømmes og dernæst både bækkenspanen og toiletbrættet skal desinficeres efter hver brug. Brug toiletrensemidler i henhold til anvisningerne fra producenten.










## 7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden [www.timago.com](http://www.timago.com)

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa [ApS og K/S] ul.

Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



04/2021(II)