

INSTRUCTIONS FOR USE

WHEELCHAIR CUSHION

Product code: **SitWELL**



WHEELCHAIR CUSHION

Product code: **ErgoTIM**



Before using the product, read these instructions. The instruction contains information necessary for the safe and proper use of the product, how to maintain and clean it. Use of the product not in accordance with the rules of the instructions for use can risk serious complications. The instruction should be kept in an easily accessible place

1. Characteristics

The cushion is made of polyurethane foam and comes with a zippered waterproof, vapor-permeable cover.

2. Application

The cushion is recommended for use in a wheelchair, armchair, chair, or car. It provides comfort, even weight distribution, and free airflow, helping to prevent pressure sores, hemorrhoids, and varicose veins. Ideal for everyday use and travel.

3. Contraindications for use:

- Do not use the device if it is not compatible with the wheelchair.
- Do not use the product other than its intended use.
- Do not use the product near an open flame or on a hot surface. It may seriously injure the user and lead to serious health damage.

4. Notes



Manufacturer does not bear responsibility of improper maintenance of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

- The skin at the site of connection should be clean.
- It is necessary to regularly check the condition of the patient's skin.

- The position of users should be changed regularly to avoid the formation of sores/wounds.
- Do not use sharp objects and equipment that can damage the cover.
- The cushion should be matched to the seat size. Maintain high hygiene of the cushion cover: clean and/or wash.

If the product is no longer suitable for use, it should be disposed of. Before disposal, the product should be cleaned to eliminate the risk of contamination.

If there are any adverse symptoms resulting from the use of the device, report it to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user or patient resides.

5. Unpacking and fitting

- When you receive the shipment with the cushion, open it carefully so as not to damage the cushion.
- Lay the cushion on a flat surface and wait for all the deformations caused during transportation to return to its original shape.
- The cushion should be fitted to the patient's seat to fully perform its functions.

6. Technical data

PARAMETERS	MODEL	
	SitWELL	ErgoTIM
Length	40 cm	40 cm
Width	43/46 cm	46 cm
Height	5 cm	7 cm
Max. weight capacity	120 kg	120 kg
Construction	perforated surface	“hedgehog”- type surface

7. Cleaning and maintenance

- Do not wash the foam insert.
- Wash the cover after removing the foam insert in a mild detergent at temperatures up to 90°C.

- The cover can be sterilized at temperatures up to 120°C.
- The cover can be disinfected with up to 60% alcohol solution.
- Do not use bleach or chemicals.
- Do not chemically clean.
- Do not use chemicals containing chlorine.
- Drying in an unfolded state is recommended.
- Do not allow heavy soiling.

8. Storage and transport conditions.

Product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

9. Warranty information

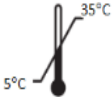
All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

COMPLAINTS ARE NOT SUBJECT TO:

- Mechanical damage (abrasions, scuffs).
- Damage resulting from natural use.
- Defects resulting from improper sizing of the cushion for the seat
- Defects resulting from failure to observe the conditions of use or the method of cleaning and maintenance.
- Discoloration of the cover.
- Comfort of use.

10. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Unique device identifications
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction

	Use by date		Permissible storage temperature
	Store in a dry place		Protect from sunlight
	Packaging is recyclable		The packaging should be disposed of in the trash
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

INSTRUKCJA UŻYWANIA

PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO

Kod produktu: **SitWELL**



PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO

Kod produktu: **ErgoTIM**



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania wyrobu, sposobu konserwacji i czyszczenia. Stosowanie wyrobu niezgodnie z zasadami instrukcji użytkowania może grozić poważnymi powikłaniami. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.

1. Wykonanie

Poduszka wykonana jest z pianki poliuretanowej, wyposażona jest w zapinany na zamek pokrowiec nieprzemakalny paroprzepuszczalny.

2. Zastosowanie

Poduszka rekomendowana jest do wózka inwalidzkiego, fotela, krzesła czy samochodu. Zapewnia komfort, równomierne rozłożenie ciężaru ciała oraz swobodny przepływ powietrza. Pomaga zapobiegać odleżynom, hemoroidom i żylakom odbytu. Idealna na co dzień i w podróży.

3. Przeciwwskazania:

- Nie stosować wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie stosować wyrobu niedopasowanego do wózka inwalidzkiego.
- Nie stosować wyrobu w pobliżu otwartego ognia lub na gorącej powierzchni. Może to poważnie zranić użytkownika i doprowadzić do poważnego uszczerbku zdrowia.

4. Uwagi



Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

- Skóra w miejscu przylegania powinna być czysta. Konieczna jest systematyczna kontrola stanu skóry pacjenta.
- Należy regularnie zmieniać pozycję użytkownika w celu uniknięcia powstawania odleżyn/ran.
- Nie używać ostrych przedmiotów i sprzętów, które mogą uszkodzić pokrowiec.
- Poduszka powinna być dopasowana do rozmiaru siedziska. Należy utrzymać wysoką higienę poduszki: czyścić lub prać.

W przypadku, gdy wyrób nie nadaje się już do użycia, należy go zutylizować. Przed utylizacją produkt należy wyczyścić w celu wyeliminowania ryzyka skażenia.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane wynikające z użytkowania wyrobu należy zgłosić to producentowi oraz właściwemu organowi Państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

5. Rozpakowywanie i montaż

- Po otrzymaniu przesyłki z poduszką, należy ją ostrożnie otworzyć, aby nie uszkodzić poduszki.
- Poduszkę należy położyć na płaskiej powierzchni i poczekać, by wszystkie odkształcenia powstałe podczas transportu wróciły do pierwotnego kształtu.
- Poduszka powinna być dopasowana do siedziska, na którym pacjent będzie siedzieć, aby w pełni spełniała swoje funkcje.

6. Parametry techniczne

PARAMETRY	MODEL	
	SitWELL	ErgoTIM
Długość	40 cm	40 cm
Szerokość	43/46 cm	46 cm
Wysokość	5 cm	7 cm
Maks. obciążenie	120 kg	120 kg
Wykonanie	perforowana powierzchnia	powierzchnia typu „język”

7. Czyszczenie i konserwacja

- Nie należy prać wkładu piankowego.
- Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego prać w delikatnym środku piorącym, w temperaturze do 90°C.
- Pokrowiec można sterylizować w temperaturze do 120°C.
- Pokrowiec można dezynfekować roztworem alkoholu o stężeniu do 60%.
- Nie stosować wybielaczy i środków chemicznych.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie stosować środków chemicznych zawierających chlor.
- Zaleca się suszenie w stanie rozłożonym.
- Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia.

8. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

9. Dane dotyczące gwarancji

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

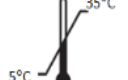
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:

- Uszkodzenia mechaniczne (przetarcia, otarcia).
- Uszkodzenia wynikające z naturalnego użycia.
- Uszkodzenia wynikające ze źle dobranego rozmiaru poduszki do siedziska.
- Wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji.
- Odbarwienia pokrowca.
- Komfort użytkowania.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
---	--------------------	---	-----------

	Numer serii		Unikalny identyfikator wyrobu (UDI)
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Użyć do daty		Dopuszczalna temperatura przechowywania
	Przechowywać w suchym miejscu		Chronić przed promieniami słonecznymi
	Opakowanie nadaje się do recyklingu		Opakowanie należy wyrzucać do kosza
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		



5906142341ANTI-BEDSOREFW



MED-MAT

Przemysław Cesarz

ul. Kochcicka 16/1

42-700 Lubliniec, Poland



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2025 (I)