


Mobilex "Terrace" T80 ramps Art. T80060, T80075 & T80125


Montage- und Gebrauchsanleitung
Montage- og brugervejledning
User Manual
Manuale d'uso e manutenzione



No permanent installation needed.
Ramp can easily be moved

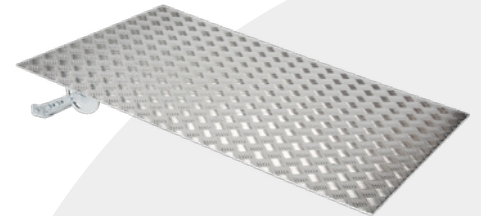

The height can be adjusted by
loosening a bolt on each side

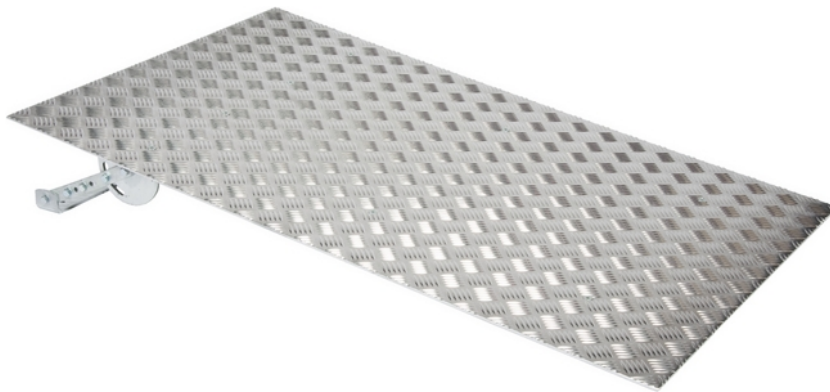

Terrace aluminium ramp with anti-slip pattern.
Height adjustable to reach upper level of the threshold



No side protection makes it
possible to open doors while
ramp is in use





**Inhaltsverzeichnis
Indholdsfortegnelse
Table of content
Indice**

Montage- und Gebrauchsanleitung

3- 5

DEUTSCH

Montage- og brugervejledning

6- 8

DANSK

User Manual

9-11

ENGLISH

Manuale d'uso e manutenzione

12-14

ITALIANO

Declaration of Conformity

15

DOC

1. Einleitung

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit, um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Mobilex T-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex-Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Dänemark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem technischem Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Beim Einstellen der Höhe darauf achten, keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden

T80060	12 cm
T80075	15 cm
T80125	25 cm


3. Beschreibung

Montagehinweise

Die Terrassen rampen werden fertig montiert geliefert. Es muss nur die Höheneinstellung reguliert werden, um die Rampe an die Schwellenhöhe anzupassen

Produkt Beschreibung

Die Terrassen Rampen bestehen aus Aluminium mit geriffelter, rutschfester Oberfläche. Die Terrassen Rampen sind in 3 Größen verfügbar.

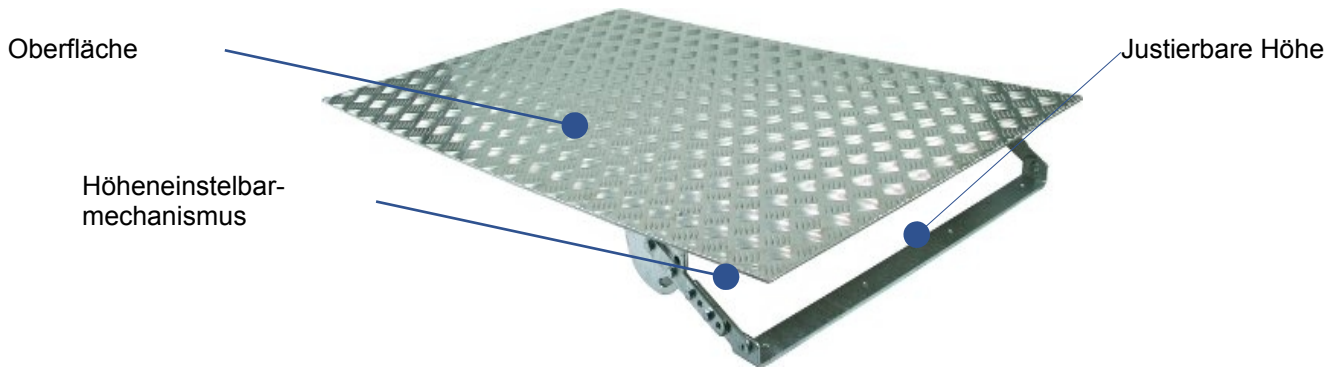

Funktionsbeschreibung

Die Terrassen Rampen bestehen aus einem festliegendem und höhenverstellbarem Rampenteil und sind z.B. zur Überwindung von Türschwellen von Terrassen o.ä. gedacht. Die Höheneinstellung ermöglicht ein Anpassen an die Höhe der Schwelle.

Handhabung beim Transport

Für einen einfacheren Transport kann bei den Mobilex Terrassen Rampen der Höheneinstell-mechanismus auf die niedrigste Höhe eingestellt werden


Optionen / Zubehör

Für diesen Rampentyp gibt es Seitenbeschütz-teil, für eine Seite montierbar, als Zubehör



4. Technische Daten:

Mobilex T80 Rampen	T80060	T80075	T80125
Gesamt-Länge	60 cm	75 cm	125 cm
Gesamt-Breite	80 cm	80 cm	80 cm
Max. überwindbarer Höhenunterschied	12 cm	15 cm	25 cm
Gesamtgewicht	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast)	225 kg	225 kg	225 kg
Höheneinstellung	5-9 cm	8-13 cm	11-28 cm

Typenschild



MOBILEX A/S
 Grønlandsvej 5
 DK - 8660 Skanderborg
 Tel: +45 87 93 22 20
 www.mobilex.dk

Mobilex product name
 EX. For outdoor and indoor use

Item nr. xxxxxx

Max. 150 kg

Max. width = 63 cm

Max. load in basket = 5 kg

CE

MD

Produced 2020.11.12

Serial nr. 001




Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformationen und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen, korrosionshemmenden und wetterbeständigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

Empfohlene Nutzungsdauer: Normalerweise 10 Jahre je nach Verwendung.

Warnung



Bitte beachten Sie, dass bei einem verbogenen oder gebrochenen Rahmen das Produkt nicht wiederverwendet werden darf, sondern ausgetauscht werden muss.

6. Wiederverwendung

Das Produkt ist zur Wiederverwendung geeignet. Vor der Wiederverwendung, bei der ein neuer Benutzer das Produkt übernehmen soll, muss das Produkt gemäß Punkt 5 geprüft werden.

7. Allgemeine Problembehebungen

<i>Problembeschreibung</i>	<i>mögliche Ursache</i>	<i>was ist zu tun</i>
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Oberfläche, auf der die Rampe liegt ist nicht eben	Kontrollieren Sie die Lage der Rampe: sie muss eben aufliegen.
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Rampe wurde verkehrt herum aufgestellt (oben/unten)	Kontrollieren Sie, dass das Etikett "A" oben und das Etikett "B" unten liegt und die Rampe mit dem Etikett "A" nach oben aufgestellt ist.
Die Rampe lässt sich nicht öffnen	Sicherungshaken nicht geöffnet	Öffnen Sie die Sicherungshaken

8. Entsorgung des Produktes

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden, die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produktes. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen, ohne unsere schriftliche Zustimmung, erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

1. Indledning

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Mobilex T ramper er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for understøtning til at overvinde forhindringer, såsom trin, med eller uden assistance af en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende Dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

2. Sikkerhed - Generelle henvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, specielt angivelsen af max. belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Ramperne må **med** assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:
T80060 12 cm
T80075 15 cm
T80125 25 cm


3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

T-Ramper er ramper lavet af aluminium. Overfladen er specielt riflet for at sikre mod at skride.

T-Ramperne leveres i kartoner, der indeholder:

- ✓ 1 Rampe
- ✓ 1 Brugervejledning

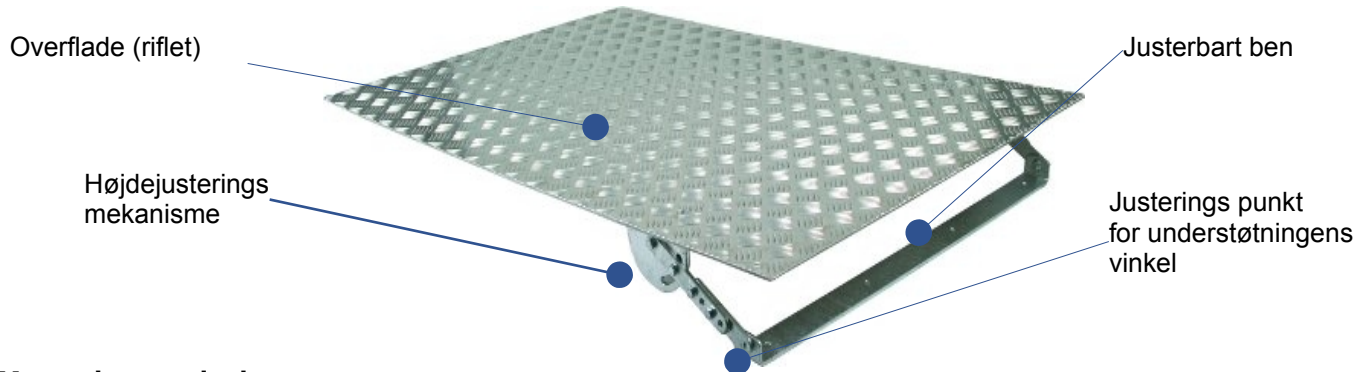

Monteringsanvisning

- Rampen leveres samlet og klar til brug
- Første justering er højden, der indstilles ved at dreje benet, indtil rampen har den ønskede højde. Herefter strammes møtrikkerne i begge sider.
- Herefter justeres vinklen på understøtningen, således at understøtningsprofilen ligger fladt mod underlaget.
- Rampen placeres sådan at overkanten af rampen flugter med dørtrinnet.
- Rampen skal placeres på et stabilt underlag.
- Kontroller at rampen ligger stabilt før der køres på den

Funktionsbeskrivelse

T-Ramper er udviklet specielt til terrassedøre, hvor rampen skal nå ind til dørtrinnet overfor fundamentet. T-Ramperne kan af stabilitetshensyn fastgøres til fliser eller fundament. Der er huller i understøtningsprofilen til dette formål.

Transport beskrivelse

T-Ramperne egner sig ikke til at transportere, men benet kan foldes ind mod rampen for at minimere volumen.










Tilbehør

Der kan fås sidebeskyttelse til T-ramperne, der kan monteres i den side, hvor det er relevant.

4. Tekniske data

Mobilex T80 ramper	T80060	T80075	T80125
Total længde	60 cm	75 cm	125 cm
Total bredde	80 cm	80 cm	80 cm
Max. højde	12 cm	15 cm	25 cm
Vægt	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Max. belastning	225 kg	225 kg	225 kg
Højdeindstillelig	5-9 cm	8-13 cm	11-28 cm

Typeskilt

 MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	  	Mobilex product name EX. For outdoor and indoor use Item nr. xxxxxx Max. 150 kg Max. width = 63 cm Max. load in basket = 5 kg	  
	Produced 2020.11.12 Serial nr. 001		

Billede af de typeskiltet (ikke original)

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men bør regelmæssigt gennemgå en kontrol, der kan foretages af en sagkyndig. Ved en sådan kontrol anbefaler vi at følgende kontrolleres og udføres:

- Lettere snavs og støv kan fjernes med en fugtig klud.
- Tungere former for snavs kan fjernes med et ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.
- Du kan også bruge en haveslange til rengøring af rampen.

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen.

Advarsel



Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller har brud må produktet ikke genanvendes, men skal udskiftes

6. Genanvendelse

Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

7. De mest almindelige problemer og løsninger

<i>Symptomer</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Hvad man skal gøre?</i>
Rampen er ikke stabil	Overfladen under rampen er ikke jævn	Kontroller placeringen af rampen. Sæt det på et jævnt underlag
Rampen er ikke stabil	Rampen vendes forkert	Kontroller om A mærkat er i den øvre ende og B mærkat i den nedre ende af rampen. Korrigér position hvis nødvendigt.
Rampe kan ikke åbnes	Låsen skal åbnes	Åbn låsen

8. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

9. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

1. Introduction

This user manual contains a description of the medical device and important guidances to ensure a correct and safe usage of the product. It is important prior to use to read this manual carefully. It is especially important to read the safety requirements and follow these.

We continuously develop our products and we reserve the right without further notice to change the specifications and functions of products.

Intended use of the device

The Mobilex T ramps are medical devices which is intended to be used only to assist patients in wheelchairs or scooters. They enable the passage of elevated points (e.g. Stairs) with or without the assistance of a helper. Mobilex Ramps thereby enables patients, sitting in a wheelchair because of invalidity, to enter or leave buildings or cars, buses etc. The ramps can be used as well inside as outside. Any other use is prohibited

By questions please take contact to your dealer or directly to Mobilex A/S.

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

2. Safety requirements

- Make sure that this user manual is read by all persons using the device. Manufacturer doesn't take any responsibility for damages and/or injuries, caused by the fact that the user manual has not been followed.
- Only use the product in flawless condition.
- If defects or errors are detected you must immediately contact the dealer.
- Follow the information on the product label.
- Only use the product for the described purpose.
- Avoid making constructive changes on the device, unless you have the manufacturer's written acceptance for such modifications.
- During different adjustments which are possible on the device the user must take care not to squeeze the fingers or other body parts between two moving elements of the device
- The device must only be used on a stable surface.
- Ramps must not be loaded with more than the "max load" described in Technical Data and on the label.
- The ramps can be used at maximum inclination of:
 - T80060 12 cm**
 - T80075 15 cm**
 - T80125 25 cm**
- Only use the ramp for the purpose it is intended for.
- Avoid making constructive changes on the ramp, unless you have the producers written accept.
- The ramp must only be used on a stable surface.
- Be careful during folding or unfolding of the ramp. There is a risk of finger squeeze or cut between parts of the ramp.


3. Description

Product description

Mobilex T-Ramps are made of aluminium. The surface is specially ribbed for anti-slipping purposes. The ramp consists of main platform and wide supporting leg with adjustable angle/height.

T-Ramps are supplied in cartons. The contents are:

- ✓ 1 Ramp
- ✓ 1 User manual

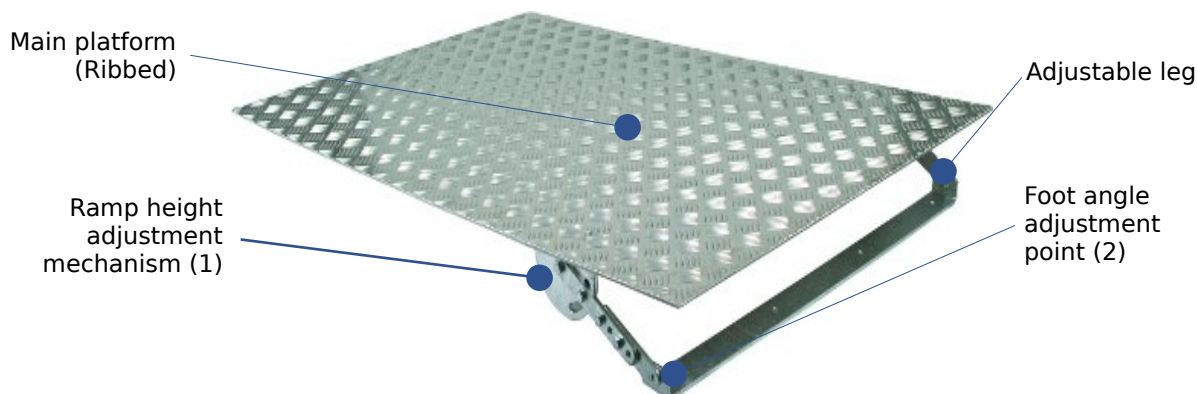

Set Up

T-Ramp comes fully assembled and ready for usage. The only set up which must be made is adjusting the ramp height and angle of ramp foot to the height of the obstacle you'd like to pass.

To make the adjustment loosen the bolts located on the height adjustment mechanism (1) and on the foot angle adjustment point (2). You must loosen bolts on both sides of the ramp. Adjust the leg so the ramp is on the desired height and tie the bolts (1). Then adjust the angle of the ramp foot, so it lies flat on the surface and tie the bolts (2).

Function description

T-Ramps are specially dedicated for help with wheelchair overpassing of elevated doorsteps, f.e. terrace & garden doors. The ramp leg must be adjusted to the height of doorstep which you'd like to pass. The ramp must be placed on a stable surface. Check that the ramp is stable before driving on it. It is possible to fix ramp to the surface (concrete, stone, tiles etc), screwing the ramp foot to the floor using provided holes located on the foot.

Transport recommendations

Alligator ramps can be folded for transport. Always assure that ramp during transportation is safely secured against unintended movements.

For the largest ramp size (T80125) it is recommended that 2 persons are needed to move ramp from one usage place to another. Stand at opposite sides of the ramp facing each other, grab the edges of the ramp with both hands at shoulder width and move ramp to the required location.

Accessories

Side protection is available for the T-ramps, which can be mounted in the side where applicable

4. Technical data

Mobilex T80 ramps	T80060	T80075	T80125
Total length	60 cm	75 cm	125 cm
Width	80 cm	80 cm	80 cm
Max. superable height	12 cm	15 cm	25 cm
Total weight	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Max. load	225 kg	225 kg	225 kg
Height adjustment	5-9 cm	8-13 cm	11-28 cm

Product label

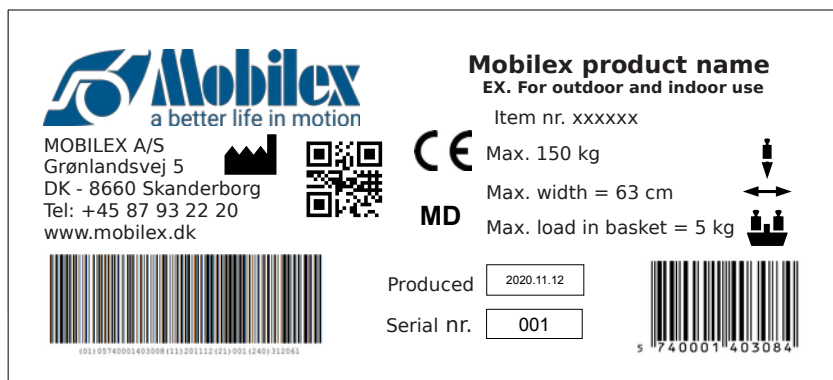


Image of the product label (not original)

5. Maintenance and cleaning


Normal dirt can be removed with standard cleaning agents and a sponge or soft rag. Check the specific product information and use only commercial cleaning products which are suitable for cleaning and disinfection (do not use alcohol-containing products and no solvents or abrasives).

Despite the solid construction and the use of resistant materials the product is subject to wear. It is therefore recommended to let check the product at regular intervals by a professional

- Lighter dirt and dust can be removed with a wet cloth.
- Heavier types of dirt can be removed with a non-corroding, mild washing agent.
- You can also use garden hose to clean the ramp.

Recommended service life: Normally 10 years depending on use.

Warning

 Please note that if the frame is bent or broken, the product must not be recycled but must be replaced

6. Reuse

The product is suitable for recycling. Before recycling, where a new user is to take over the product, the product must be checked according to point 5.

7. Most common problems and solutions

<i>Symptoms</i>	<i>possible cause</i>	<i>what to do?</i>
Ramp is not stable	The surface under the ramp is not flat	Check the position of the ramp. Put it on flat, smooth surface
Ramp is not stable	Ramp is putted on the surface upside down	Check if the A label is in the upper end and B label in the lower end of the ramp. Correct position if needed.
Ramp doesn't open	The lock strap is not loosen	Loosen the lock strap

8. Disposal of the product

The product can not be disposed of with household waste but must be brought to the local recycling centre.

9. Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.

1. Introduzione

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danimarca	Telefono: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex-care.com
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

2. Avvisi per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- se il prodotto presenta un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta del prodotto
- utilizzare il prodotto solo per l'uso consentito
- al momento del montaggio della rampa chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo

3. Descrizioni generali

Descrizione del prodotto

Le rampe T sono d'alluminio con una superficie antiscivolo ricoperta di silicato d'alluminio.
Le rampe T sono disponibili in 2 misure diverse.


Descrizione della funzione

Le rampe Mobilex sono ideate per aiutare persone in carrozzina a superare ostacoli con o senza l'aiuto di una persona accompagnatoria.

Fornitura

Le rampe Mobilex T sono fornite in 1 cartone contenente:

- ✓ 1 rampa Mobilex T
- ✓ questo manuale

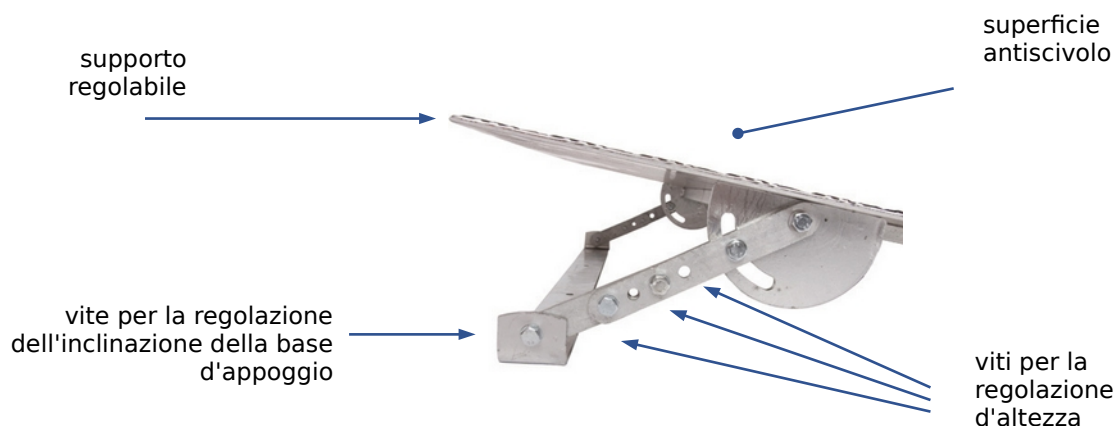

Assemblaggio

Le rampe modello T sono fornite con un supporto regolabile. Il supporto va applicato alla rampa fissandoli con le viti in dotazione. Regolare quindi il supporto all'altezza desiderata ponendo attenzione che sia regolato in ugual misura su ambo i lati.

Descrizione di funzionamento

Le rampe modello T sono costruite in alluminio e sono ideate per il superamento di barriere architettoniche (p.e. soglie e piccoli dislivelli ecc.). La regolazione in altezza permette di adattare la rampa alla soglia.

Indicazioni per il trasporto

Per facilitarne il trasporto si può eventualmente svitare il supporto regolabile


Accessori opzionali

Per questo modello di rampa non sono disponibili ulteriori accessori


4. Dati tecnici

Rampa Mobilex T80	T80060	T80075	T80125
Lunghezza totale	60 cm	75 cm	125 cm
Larghezza totale	80 cm	80 cm	80 cm
Dislivello max. superabile	12 cm	15 cm	25 cm
Peso totale	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Portata massima	225 kg	225 kg	225 kg
Regolazione d'altezza	5-9 cm	8-13 cm	11-28 cm

Targhetta di identificazione



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk



Mobilex product name
EX. For outdoor and indoor use

Item nr. xxxxxx

Max. 150 kg

Max. width = 63 cm

Max. load in basket = 5 kg

Produced 2020.11.12

Serial nr. 001






immagine dell'etichetta (esempio non originale)

5. Pulizia e manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi). Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

Vita utile consigliata: massimo 10 anni a seconda dell'uso.

Attenzione



Se il telaio è piegato o rotto, il prodotto non può essere riciclato ma deve essere sostituito.

6. Riutilizzo

Il prodotto è adatto al riutilizzo. Prima del riutilizzo, se un nuovo utente deve prendere in consegna il prodotto, il prodotto deve essere controllato secondo il punto.

7. Risoluzione di piccoli guasti

<i>cosa succede?</i>	<i>quale può essere la causa?</i>	<i>cosa fare?</i>
la rampa non è stabile	le corsie non poggiano su terreno pianeggiante	controllate che la rampa poggi su terreno pianeggiante sia in alto che in basso
la rampa non è stabile	la rampa è stata posata al contrario (sopra/sotto)	controllate che l'etichetta "A" identifichi la parte alta "A" e l'etichetta "B" la parte bassa. Ev. invertite la posa della rampa
le due corsie non si aprono	il gancetto di sicurezza è chiuso	aprite il gancetto di sicurezza

8. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

9. Garanzia

Mobilex A/S offre 2 anni di garanzia per danni causati da errori di produzione o materiali. La garanzia non è valida per riparazioni o utilizzi non intenzionali del prodotto. Le parti soggette a normale usura non sono coperte da garanzia, a meno che l'usura non sia causata da un difetto di fabbricazione. In caso di modifiche apportate al prodotto senza una nostra approvazione scritta, il marchio CE e la garanzia del prodotto non saranno più valide. In caso di danni al prodotto coperti da questa garanzia, si prega di informare il rivenditore o direttamente Mobilex A/S. La garanzia non copre spese di trasporto e non comprende risarcimenti per danni a persone o risarcimenti per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione. La garanzia non copre danni dovuti al mancato rispetto del manuale d'uso.

Declaration of Conformity (CE)

(Konformitätserklärung / Konformitetserklæring / Dichiarazione di conformità)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Denmark,

hereby declares that the

(erklært hiermit, dass das Produkt / erklærer hermed, at / dichiara che il)

Mobilex "Terrace" T80 ramps
(Rampe, Rampa a canalina)

Item no. T80060, T80075 & T80125
(Artikel Nr., Varenr., Codice)

is designed and produced in accordance with the technical documentation and the basic requirements of the:

(In Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt /

Er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i/

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE)

In case of unintended incidents or suspected faults, failures or defects of the product, the dealer or Mobilex A/S must be contacted /

Ved utilsigtede hændelser eller hvis der er formodning om, at der er fejl, svigt eller mangler ved produktet skal forhandleren eller Mobilex A/S kontaktes /

Bei unbeabsichtigten Vorfällen oder vermuteten Fehlern, Ausfällen oder Defekten des Produkts muss der Händler oder Mobilex A/S kontaktiert werden /

In caso di incidenti involontari, di sospetti di guasti, malfunzionamenti o difetti del prodotto, è necessario contattare il rivenditore o la Mobilex A/S.



EU2017/745 for Medical Equipment

(über Medizinprodukte / for medicinalprodukter / del Consiglio Europeo)

Thomas Nygaard Christensen
Managing Director/Geschäftsführer/
Adm. Direktør/Amministratore unico
Mobilex A/S
Skanderborg, 03-03-2021



.....
Signature/Unterschrift/Underskrift/firma

Serial number:

